


# Einfache Anwendung:


## Die Inhalation mit dem Easyhaler® Schritt für Schritt.

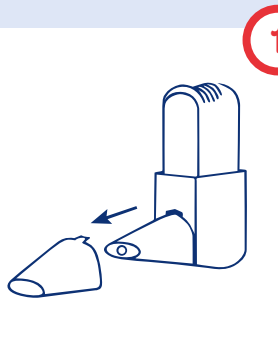

1

- Schutzkappe vom Mundstück abziehen


### Schütteln

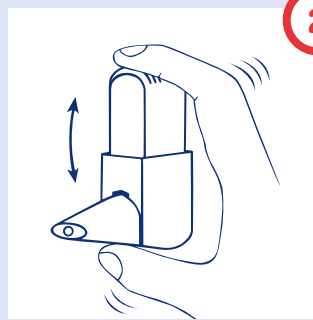

2

- Den Easyhaler® 3- bis 5-mal kräftig senkrecht schütteln


### Klicken

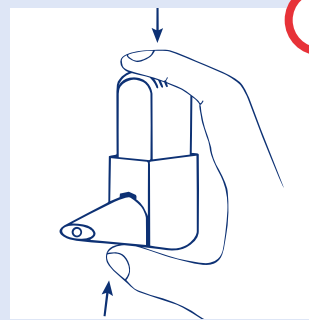

3

- Gerät senkrecht halten
- Zwischen Daumen und Zeigefinger einmal kräftig zusammendrücken, bis ein Klickgeräusch zu hören ist
- Danach in die Ausgangsposition zurückgleiten lassen

### Inhalieren

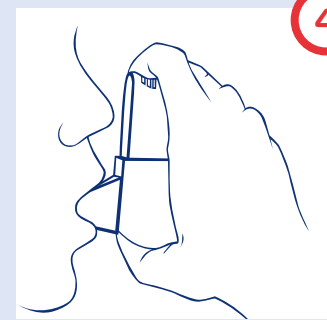


4

- Normal ausatmen (aber NICHT in den Easyhaler®)
- Den Easyhaler® mit den Lippen fest umschließen
- Stark und tief durch den Easyhaler® einatmen
- Gerät entfernen und 5 Sekunden den Atem anhalten
- Schutzkappe auf das Mundstück stecken

### Wenn Sie eine Schutzbox verwenden

Der Easyhaler® muss für die Inhalation NICHT aus der Schutzbox genommen werden.

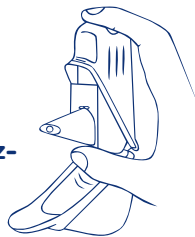

- Schutzbox öffnen
- Schutzkappe vom Mundstück abziehen
- Inhalieren, wie in den Schritten 2 bis 4 beschrieben
- Schutzkappe auf das Mundstück stecken
- Schutzbox schließen


### Bei Fehlanwendung

#### Wenn...

- der Easyhaler® versehentlich geladen wurde
- der Easyhaler® mehr als einmal betätigt wurde
- in das Gerät ausgeatmet wurde

#### Dann...

- den Easyhaler® mit dem Mundstück auf eine Tischoberfläche oder in Ihre Hand ausklopfen

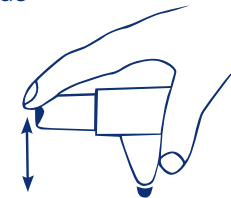


**Wenn Ihnen mehr als eine Dosis pro Anwendung verordnet wurde, wiederholen Sie die Schritte 2 bis 4.**

- ! **Um das Risiko einer Pilzinfektion zu verringern, spülen Sie Mund und Rachen mit Wasser aus OHNE es hinunterzuschlucken.**

### Der Zählerstand

Der Easyhaler® verfügt über ein Zählwerk, das anzeigt, wie viele Einzeldosen noch übrig sind.

- Nach jeder 5. Anwendung bewegt sich das Zählwerk weiter
- Rote Markierung signalisiert: nur noch 20 Einzeldosen enthalten
- Wenn Zähler auf 0 steht, muss der Easyhaler® ersetzt werden

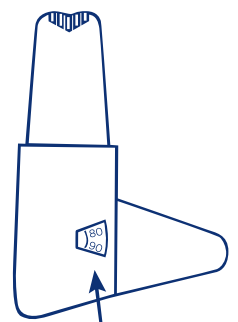

Einen Film zur richtigen Anwendung und weitere Informationen finden Sie unter [www.easyhaler.de](http://www.easyhaler.de)

 **Easyhaler®**

Einfach, präzise, zuverlässig – dem Patienten zuliebe.

Orion Pharma GmbH Notkestraße 9 22607 Hamburg  
Fon 040.89 96 89-0 Fax 040.89 96 89-96  
info.hamburg@orionpharma.com  
[www.easyhaler.de](http://www.easyhaler.de) [www.orionpharma.de](http://www.orionpharma.de)

 **ORION PHARMA**