


Uso semplice:


Istruzioni dettagliate per l'inalazione con Easyhaler®.

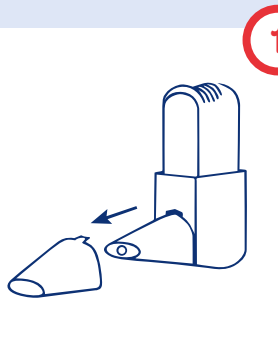

1

- Togliere il cappuccio protettivo dal bocaglio


Agitare

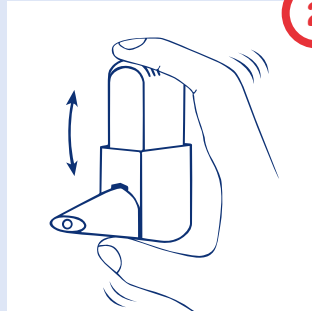

2

- Agitare energicamente Easyhaler® per 3 - 5 volte


Premere

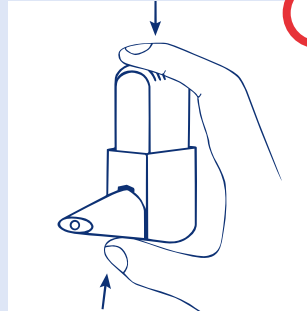

3

- Tenere l'apparecchio in posizione verticale
- Comprimere energicamente una volta il dispositivo fra pollice e indice, fino a udire un clic
- Quindi, lasciar scorrere di nuovo nella posizione di partenza

Inalare

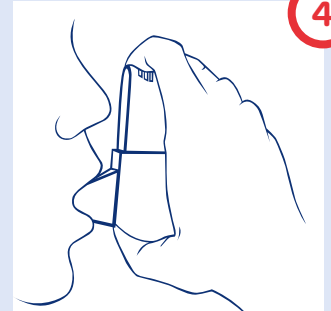

4

- Espirare normalmente (ma NON nel bocaglio di Easyhaler®)
- Serrare fermamente Easyhaler® con le labbra
- Inspirare profondamente e con forza attraverso Easyhaler®
- Allontanare il dispositivo e trattenere il respiro per 5 secondi
- Applicare il cappuccio protettivo sul bocaglio

Se si usa un astuccio protettivo

Per l'inalazione, non è necessario estrarre Easyhaler® dal suo astuccio protettivo.



- Aprire l'astuccio protettivo
- Togliere il cappuccio protettivo dal bocaglio
- Inalare come descritto dal punto 2 al punto 4
- Applicare il cappuccio protettivo sul bocaglio
- Chiudere l'astuccio protettivo


In caso di uso non corretto

Se...

- Easyhaler® è stato caricato inavvertitamente
- Easyhaler® è stato azionato più di una volta
- si è espirato nel dispositivo

Bisogna...

- picchiare Easyhaler® con il bocaglio sulla superficie di un tavolo o sulla mano

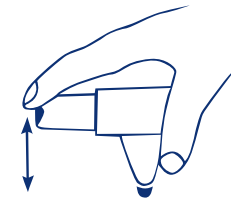


Se è stata prescritta più di una dose per applicazione, ripetere i punti da 2 a 4.

Per ridurre il rischio di infezione da funghi, sciacquare bocca e gola con acqua, SENZA deglutirla.

Lettura del conta-dosi

Easyhaler® dispone di un dispositivo conta-dosi, che indica le singole dosi ancora rimanenti.

- Il dispositivo si muove in avanti ogni 5 applicazioni
- Il segno rosso indica: ancora 20 singole dosi disponibili
- Quando il conta-dosi è sullo 0, Easyhaler® va sostituito

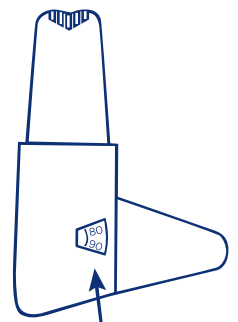

Un video sul corretto uso e ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.easyhaler.de

 **Easyhaler®**

Semplice, preciso, sicuro – per la salute del paziente.

Orion Pharma GmbH Notkestraße 9 D-22607 Amburgo
Tel +49 (0) 40 89 96 89-0 Fax +49 (0) 40 89 96 89-96
info.hamburg@orionpharma.com
www.easyhaler.de www.orionpharma.de

 **ORION PHARMA**