


# Aplicare simplă:


## Inhalarea cu Easyhaler® pas cu pas.

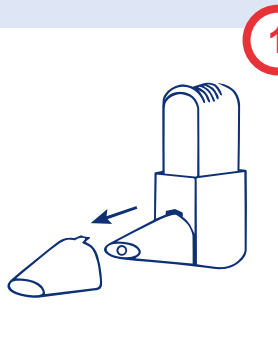

1

- Scoateți capșonul de protecție de pe muștiuc


### Scuturați

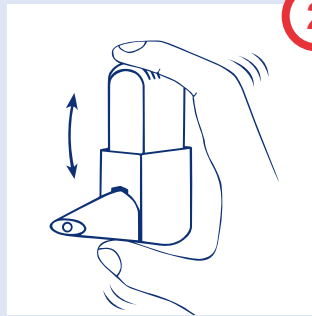

2

- Scuturați energic Easyhaler® de 3 până la 5 ori


### Apăsați

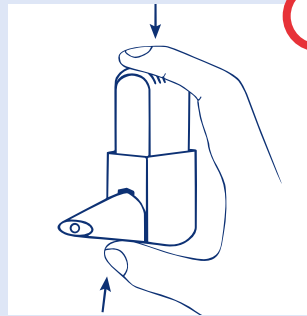

3

- Țineți aparatul vertical
- Strângeți o dată cu putere între degetul mare și cel arătător, până se aude un sunet de înclichetare
- Apoi lăsați să alunece înapoi în poziția inițială

### Inhalați

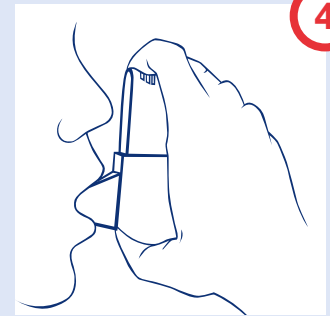


4

- Expirați normal (dar NU în Easyhaler®)
- Țineți Easyhaler® strâns cu buzele
- Inspirați puternic și profund prin Easyhaler®
- Îndepărtați aparatul și timp de 5 secunde țineți-vă respirația
- Trageți capșonul de protecție pe muștiuc

### Atunci când folosiți o cutie de protecție

Easyhaler® NU trebuie scos din cutia de protecție pentru inhalare.

- Deschideți cutia de protecție
- Scoateți capșonul de protecție de pe muștiuc
- Inhalați cum este descris la pașii 2 până la 4
- Trageți capșonul de protecție pe muștiuc
- Închideți cutia de protecție

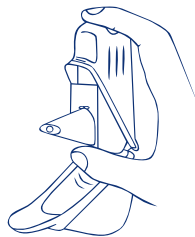


### La o utilizare eronată

Atunci când...

- Easyhaler® a fost încărcat din greșeală
- Easyhaler® a fost acționat mai mult decât o dată
- S-a expirat în aparat

Apoi...

- Bateți ușor Easyhaler® cu muștiucul pe suprafața unei mese sau în mâna dumneavoastră

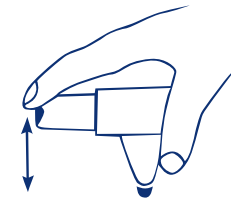


**Dacă vi s-a prescris mai mult de o doză per aplicație repetați pașii de la 2 până la 4.**

**! Pentru a micșora riscul unei infecții cu ciuperci clătiți-vă gura și gâtul cu apă FĂRĂ să o înghițiți.**

### Nivelul contorului

Easyhaler® dispune de un contor, care indică câte doze unitare mai sunt disponibile.

- După fiecare a 5-a utilizare contorul avansează
- Marcajul roșu semnalizează: Mai sunt conținute doar 20 de doze unitare
- Atunci când contorul se află la 0, Easyhaler® trebuie înlocuit

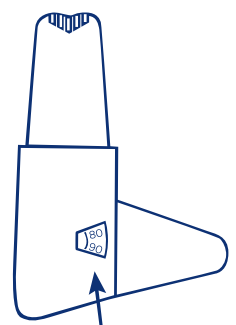

Găsiți un film referitor la o utilizare corectă și alte informații la adresa [www.easyhaler.de](http://www.easyhaler.de)

 **Easyhaler®**

Simple, precis, de încredere –  
Preferatul pacienților.

Orion Pharma GmbH Notkestraße 9 D-22607 Hamburg  
Telefon +49 (0) 40 89 96 89-0 Fax +49 (0) 40 89 96 89-96  
info.hamburg@orionpharma.com  
[www.easyhaler.de](http://www.easyhaler.de) [www.orionpharma.de](http://www.orionpharma.de)

 **ORION PHARMA**