


Простое применение:


Пошаговое описание ингаляции при помощи устройства Easyhaler®.

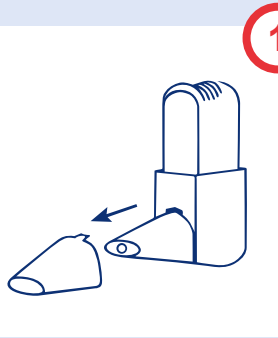

1

- Снимите защитный колпачок с загубника


Потрясите

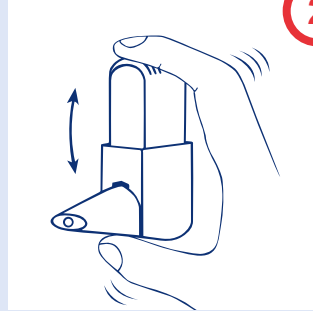

2

- Сильно встряхните ингалятор Easyhaler® 3–5 раз


Щелчок

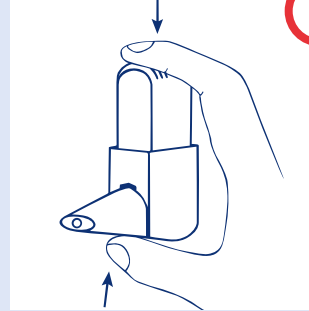

3

- Держите устройство вертикально
- Однократно сильно сожмите его между большим и указательным пальцем, пока не услышите щелчок
- После этого позвольте устройству разжаться в исходное положение

Вдох

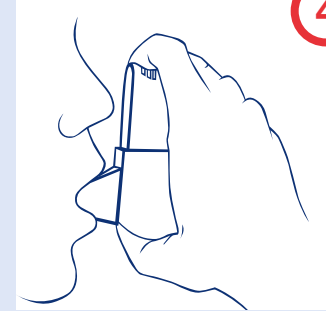


4

- Выдохните обычным образом (однако НЕ в ингалятор Easyhaler®)
- Плотно захватите Easyhaler® губами
- Сильно и глубоко вдохните через Easyhaler®
- Удалите устройство и в течение 5 секунд задержите дыхание
- Наденьте защитный колпачок на загубник

Если Вы используете защитный корпус

Easyhaler® НЕ нужно доставать из него для ингаляции.

- Откройте защитный корпус
- Снимите защитный колпачок с загубника
- Выполните ингаляцию, как описано в шагах 2–4
- Наденьте защитный колпачок на загубник
- Закройте защитный корпус

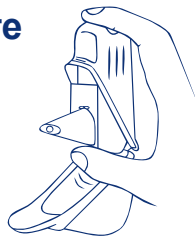


При неправильном применении

Если...

- Easyhaler® был сжат до щелчка случайно
- Easyhaler® был задействован более одного раза
- Вы выдохнули в устройство

То...

- постучите загубником ингалятора Easyhaler® о поверхность стола или о свою ладонь

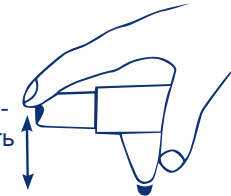


Если Вам предписана более чем одна доза, повторите шаги 2–4.

! Для уменьшения риска грибной инфекции прополощите рот и глотку водой, НЕ проглатывая ее.

Показания счетчика

Ингалятор Easyhaler® снабжен счетчиком, который показывает количество оставшихся доз.

- После пятого применения показания на счетчике изменяются
- Красная отметка – это сигнал о том, что осталось всего лишь 20 доз
- Если счетчик на нуле, ингалятор Easyhaler® нужно заменить

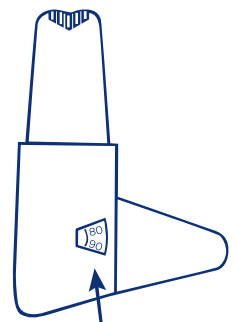

Ролик, в котором показано правильное применение ингалятора и прочую информацию, Вы найдете на сайте www.easyhaler.de

 **Easyhaler®**

Легко, точно и надежно -
на благо пациенту

Orion Pharma GmbH Notkestraße 9 D-22607 Hamburg
Телефон: +49 (0) 40 89 96 89-0 Факс: +49 (0) 40 89 96 89-96
info.hamburg@orionpharma.com
www.easyhaler.de www.orionpharma.de

 **ORION PHARMA**