


Jednostavna primena:


Udisanje pomoću Easyhaler-a® korak po korak.

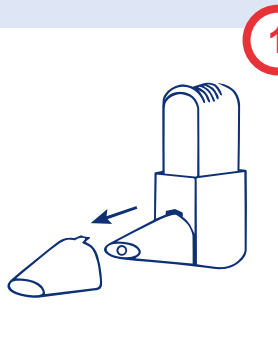

1

- Skinuti poklopac sa usnika


Protresti

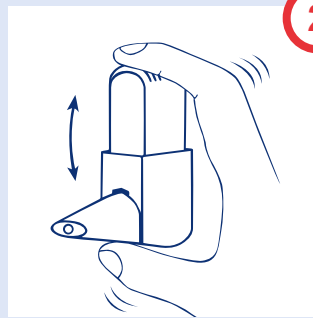

2

- Easyhaler® tri do pet puta snažno protresti


Pritisnuti

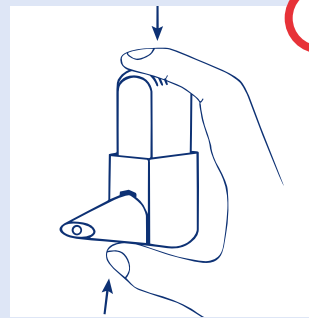

3

- Dozni inhalator držati uspravno
- Palcem i kažiprstom jednom snažno pritisnuti dok se ne čuje klik
- Potom pustiti da dozni inhalator doklizi do izlaznog položaja

Udahnuti

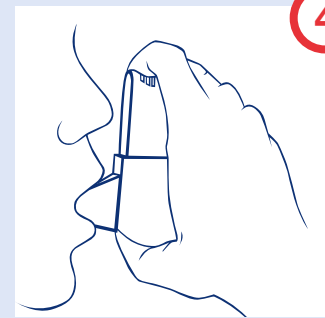


4

- Normalno izdahnuti vazduh iz pluća (ali NE u Easyhaler®)
- Easyhaler® čvrsto obuhvatiti usnama
- Snažno i duboko udahnuti kroz Easyhaler®
- Pomeriti dozni inhalator od usta i zadržati dah 5 sekundi
- Staviti poklopac na usnik

Kada koristite zaštitnu masku za dozni inhalator

Easyhaler® se za inhalaciju NE mora vaditi iz zaštitne maske.

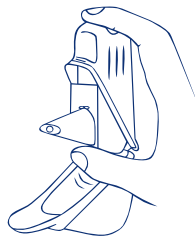

- Otvoriti zaštitnu masku
- Skinuti poklopac sa usnika
- Udahnuti kao što je opisano u koracima 2 do 4
- Staviti poklopac na usnik
- Zatvoriti zaštitnu masku


Kod pogrešne primene

Kada...

- se u Easyhaler-u® nenamerno odmeri doza
- se u Easyhaler-u® odmeri doza više puta nego što je potrebno
- se izdahne u dozni inhalator

Onda...

- Easyhaler® sa strane usnika više puta udariti o ravnu površinu ili lupiti o dlan

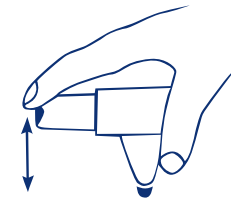


Ako vam je propisano više od jedne doze po primeni, ponovite korake 2 do 4.

Da biste smanjili rizik od gljivične infekcije, vodom isperite usta i grlo te ispljunite.

Stanje na brojilu

Easyhaler® raspolaže mehanizmom brojanja koji prikazuje koliko je pojedinačnih doza još ostalo.

- Stanje na mehanizmu brojanja se menja nakon svake 5. primene
- Crvena oznaka označava da je preostalo još samo 20 pojedinačnih doza
- Kada je brojilo na nuli, potrebno je zameniti Easyhaler®

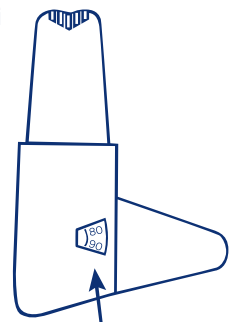

Video isečak o pravilnoj primeni kao i detaljnije informacije naći ćete na stranici www.easyhaler.de

 **Easyhaler®**

Jednostavno, precizno, pouzdano – za dobro pacijenta.

Orion Pharma GmbH Notkestraße 9 D-22607 Hamburg
Tel. +49 (0) 40 89 96 89-0 Faks +49 (0) 40 89 96 89-96
info.hamburg@orionpharma.com
www.easyhaler.de www.orionpharma.de

ORION PHARMA