


Fácil de utilizar:

Uso correcto del Easyhaler®. Pasos a seguir.




- Destape la boquilla

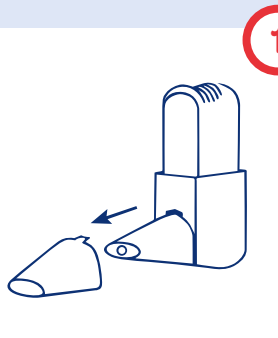

- Agite el Easyhaler® vigorosamente de 3 a 5 veces



- Mantenga el inhalador en posición vertical
- Presione el inhalador fuertemente, una sola vez, entre el pulgar y el índice, hasta oír un "clic"
- Seguidamente, déjelo que recupere su posición inicial

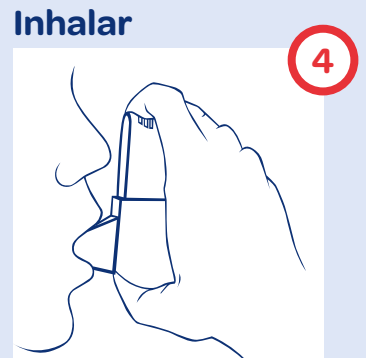


- Expire normalmente (pero NO en el Easyhaler®)
- Selle bien los labios alrededor de la boquilla del Easyhaler®
- Inspire fuerte y profundamente a través del Easyhaler®
- Retire el inhalador de la boca y mantenga la respiración durante 5 segundos
- Tape de nuevo la boquilla

Si utiliza un estuche protector

NO necesita retirar el Easyhaler® del estuche para inhalar.

- Abra el estuche
- Destape la boquilla
- Inhale tal cual se indica en los pasos de 2 a 4
- Tape de nuevo la boquilla
- Cierre el estuche

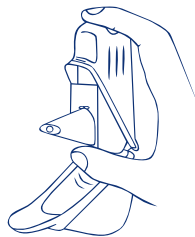


Uso incorrecto

Qué hacer si...

- cargó fortuitamente el Easyhaler®
- oprimió el Easyhaler® más de una vez
- expiró en el inhalador

En estos casos...

- golpee el Easyhaler® con la boquilla sobre una mesa o sobre la palma de la mano

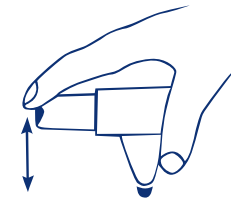


Si le han recetado más de una dosis por vez, repita los pasos de 2 a 4.

Para minimizar el riesgo de una infección por hongos, enjuague la boca y haga gárgaras con agua después del uso. Atención a NO tragar el agua.

Estado del contador

El Easyhaler® dispone de un mecanismo contador que indica el número de dosis individuales disponibles todavía.

- El estado del contador avanza tras cada quinta administración.
- La marca roja indica que en el inhalador quedan sólo 20 dosis individuales
- Cuando el contador esté en „0“ debe sustituir el Easyhaler®.

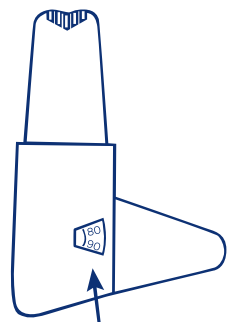

El vídeo informativo en www.easyhaler.de muestra el uso correcto del inhalador

 **Easyhaler®**

Sencillo, preciso y fiable – en beneficio del paciente.

Orion Pharma GmbH Notkestraße 9 D-22607 Hamburg
Teléfono +49 (0) 40 89 96 89-0 Fax +49 (0) 40 89 96 89-96
info.hamburg@orionpharma.com
www.easyhaler.de www.orionpharma.de

ORION PHARMA