


# Kolay kullanım:

## Easyhaler® cihazıyla adım adım enhalasyon.


1

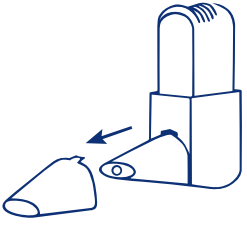

- Koruyucu kapağı ağızlıktan çıkartın

### Çalkalayın


2

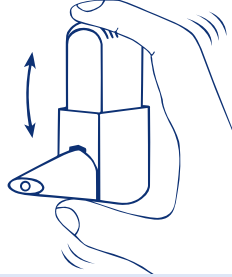

- Easyhaler® cihazını 3 ilâ 5 kez kuvvetle çalkalayın

### Tıklatın


3

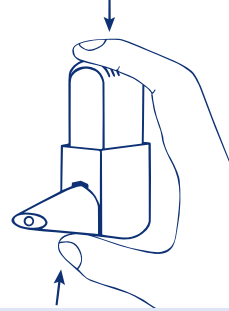

- Cihazı dikey olarak tutun
- Tık sesi gelinceye kadar başparmağınızla işaret parmağınız arasında bir kez kuvvetle sıkıştırın
- Ardından bırakın, başlangıç konumuna geri dönsün

### Soluyun

4

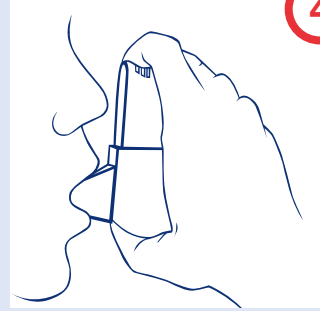


- Normal bir şekilde soluk verin (Easyhaler® cihazının içine DEĞİL)
- Easyhaler® cihazını dudaklarınızın arasına alın
- Easyhaler® cihazının içinden güçlü ve derin bir şekilde soluk alın
- Cihazı ağızınızdan çıkartıp 5 saniye nefesinizi tutun
- Koruyucu kapağı ağızlığa takın

## Koruyucu kutu kullanıyorsanız

Easyhaler® cihazının, enhalasyon için koruma kutusundan çıkartılması **GEREKMEZ**.

- Koruma kutusunu açın
- Koruyucu kapağı ağızlıktan çıkartın
- 2'den 4'e kadar olan adımlarda açıklandığı şekilde enhalasyon yapın
- Koruyucu kapağı ağızlığa takın
- Koruma kutusunu kapatın

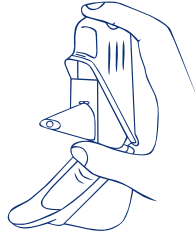


## Yanlış kullanım durumunda

### Şu durumlarda:

- Easyhaler® yanlışlıkla doldurulduysa
- Easyhaler® birden çok kez çalıştırıldıysa
- Cihazın içine soluk verildiyse

### Şunu yapın:

- Easyhaler® cihazının ağızlığını masaya veya elinize vurun

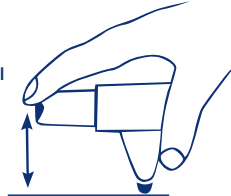


**Doktorunuz tarafından her kullanım için birden çok doz yazılmışsa, 2'den 4'e kadar olan adımları tekrarlayın.**

**! Mantar enfeksiyonu riskini azaltmak için, ağızınızı ve boğazınızı, YUTMAKSIZIN suyla çalkalayın.**

## Sayaç

Easyhaler® cihazında, kaç doz kaldığını gösteren bir sayaç vardır.

- Sayaç, 5 kullanımda bir atar
- Kırmızı işaret, sadece 20 doz kaldığını gösterir
- Sayaç 0'a geldiğinde, Easyhaler® cihazının değiştirilmesi gerekir

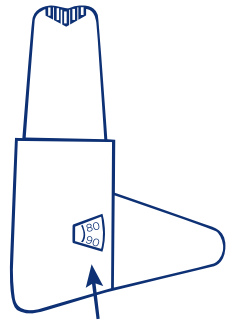

Doğru kullanım hakkındaki videoyu ve ek bilgileri [www.easyhaler.de](http://www.easyhaler.de) adresinde bulabilirsiniz.

 **Easyhaler®**

Hastanın rahatlığı için -  
kolay, hassas, güvenilir.

Orion Pharma GmbH Notkestraße 9 D-22607 Hamburg  
Telefon +49 (0) 40 89 96 89-0 Faks +49 (0) 40 89 96 89-96  
info.hamburg@orionpharma.com  
[www.easyhaler.de](http://www.easyhaler.de) [www.orionpharma.de](http://www.orionpharma.de)

**ORION**  
PHARMA