


Uso semplice:

Istruzioni dettagliate per l'inalazione con Easyhaler®.


1

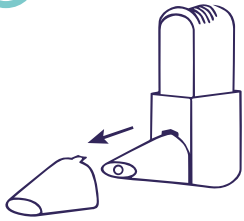

- Togliere il cappuccio protettivo dal bocaglio

Agitare


2

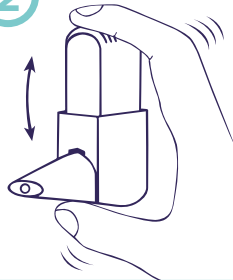

- Agitare energicamente Easyhaler® per 3 - 5 volte

Premere


3

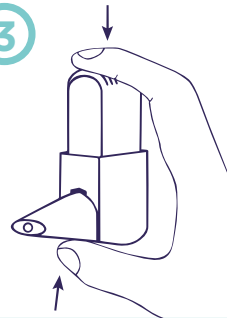

- Tenere l'apparecchio in posizione verticale
- Comprimere energicamente una volta il dispositivo fra pollice e indice, fino a udire un clic
- Quindi, lasciar scorrere di nuovo nella posizione di partenza

Inalare

4

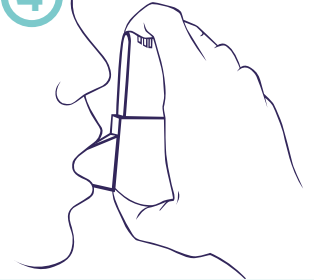

- Espirare normalmente (ma NON nel bocaglio di Easyhaler®)
- Serrare fermamente Easyhaler® con le labbra
- Inspirare profondamente e con forza attraverso Easyhaler®
- Allontanare il dispositivo e trattenere il respiro per 5 secondi
- Quindi espirare accanto al dispositivo
- Applicare il cappuccio protettivo sul bocaglio


Se è stata prescritta più di una dose per applicazione, ripetere i punti da 2 a 4.

Per ridurre il rischio di infezione da funghi, sciacquare bocca e gola con acqua, SENZA deglutirla.

Letture del conta-dosi

Easyhaler® dispone di un dispositivo conta-dosi, che indica le singole dosi ancora rimanenti.

- Il dispositivo si muove in avanti ogni 5 applicazioni
- Il segno rosso indica: ancora 20 singole dosi disponibili
- Quando il conta-dosi è sullo 0, Easyhaler® va sostituito

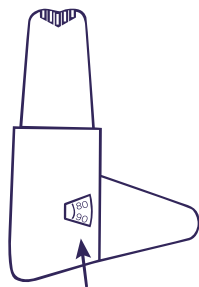

Se usa un astuccio protettivo

Per l'inalazione, NON è necessario estrarre Easyhaler® dal suo astuccio protettivo

- Aprire l'astuccio protettivo
- Rimuovere il cappuccio protettivo dal bocaglio
- Inalare come descritto nei punti da 2 a 4
- Applicare il cappuccio protettivo sul bocaglio
- Chiudere l'astuccio protettivo



In caso di uso non corretto


La tecnica di inalazione di Easyhaler® impedisce un dosaggio doppio!

Se...

- Easyhaler® è stato caricato inavvertitamente
- Easyhaler® è stato azionato più di una volta
- si è espirato nel dispositivo

Bisogna...

- picchiettare Easyhaler® con il bocaglio sulla superficie di un tavolo o sulla mano

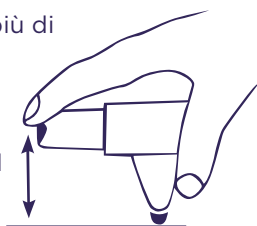

Ulteriori informazioni sono disponibili su:
www.easyhaler.de



ORION Pharma GmbH

Notkestraße 9 · 22607 Hamburg
Fon 040-899689-0
info-hamburg@orionpharma.com
www.orionpharma.de



Manufactured in Finland

ORION
PHARMA