




# Aplicare simplă:


## Inhalarea cu Easyhaler® pas cu pas.

### Scuturați

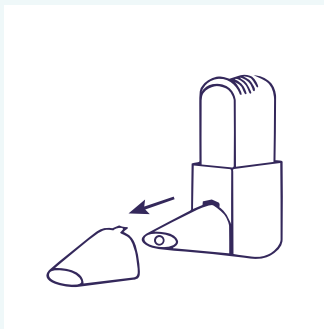


- Scoateți capșonul de protecție de pe muștiuc

1

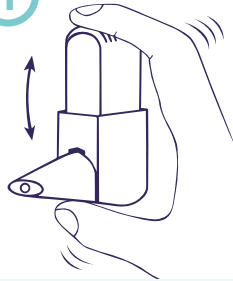


- Scuturați energic Easyhaler® de 3 până la 5 ori

### Apăsați

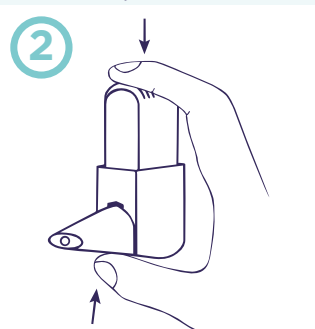

- Țineți aparatul vertical
- Strângeți o dată cu putere între degetul mare și cel arătător, până se aude un sunet de înclichetare
- Apoi lăsați să alunece înapoi în poziția inițială

### Inhalați

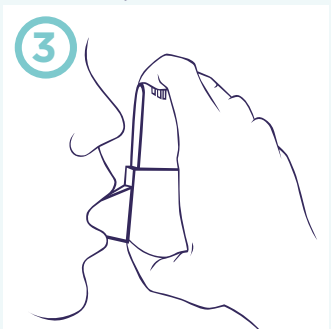

- Expirați normal (dar NU în Easyhaler®)
- Țineți Easyhaler® strâns cu buzele
- Inspirați puternic și profund prin Easyhaler®
- Îndepărtați aparatul și timp de 5 secunde țineți-vă respirația
- Expirați apoi lângă aparat
- Trageți capșonul de protecție pe muștiuc


Dacă vi s-a prescris mai mult de o doză per aplicație repetați pașii de la 1 până la 3.

▶ Pentru a micșora riscul unei infecții cu c iuperi clătiți-vă gura și gâtul cu apă FĂRĂ să o înghițiți.

### Nivelul contorului

Easyhaler® dispune de un contor, care indică câte doze unitare mai sunt disponibile.


- După fiecare a 5-a utilizare contorul avansează
- Marcajul roșu semnalizează: Mai sunt conținute doar 20 de doze unitare
- Atunci când contorul se află la 0, Easyhaler® trebuie înlocuit

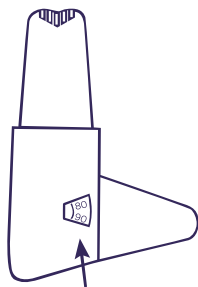

### Dacă folosiți o cutie de protecție

**NU trebuie să scoateți Easyhaler® din cutia de protecție pentru a-l utiliza.**

- Deschideți cutia de protecție
- Scoateți capacul de protecție de pe muștiuc
- Inhalați conform descrierii de la pașii 1-3
- Amplasați capacul de protecție pe muștiuc
- Închideți cutia de protecție

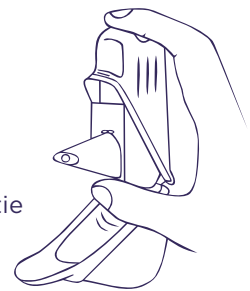

### La o utilizare eronată


**Tehnice Easyhaler® împiedică o dozare dublă!**

**Atunci când...**

- Easyhaler® a fost încărcat din greșeală
- Easyhaler® a fost acționat mai mult decât o dată
- S-a expirat în aparat

**Apoi...**

- Bateți ușor Easyhaler® cu muștiucul pe suprafața unei mese sau în mâna dumneavoastră

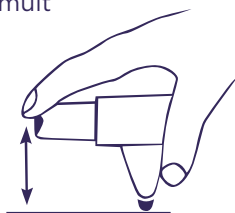

Informații suplimentare găsiți pe:  
[www.easyhaler.de](http://www.easyhaler.de)



ORION Pharma GmbH

Jürgen-Töpfer-Str. 46 · 22763 Hamburg  
Fon 040-899689-0  
info-hamburg@orionpharma.com  
www.orionpharma.de



Manufactured in Finland

**ORION  
PHARMA**

**EASYHALER**