


Aplicare simplă:

Inhalarea cu Easyhaler® pas cu pas.


1

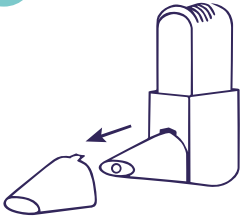

- Scoateți capșonul de protecție de pe muștiuc

Scuturați

2

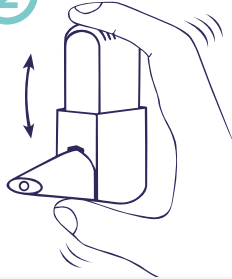

- Scuturați energic Easyhaler® de 3 până la 5 ori

Apăsați


3



- Țineți aparatul vertical
- Strângeți o dată cu putere între degetul mare și cel arătător, până se aude un sunet de înclichetare
- Apoi lăsați să alunece înapoi în poziția inițială

Inhalați

4

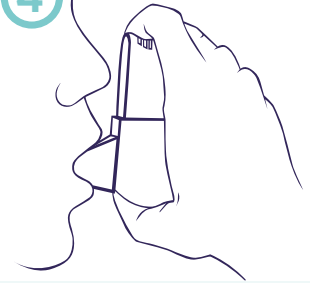

- Expirați normal (dar NU în Easyhaler®)
- Țineți Easyhaler® strâns cu buzele
- Inspirați puternic și profund prin Easyhaler®
- Îndepărtați aparatul și timp de 5 secunde țineți-vă respirația
- Expirați apoi lângă aparat
- Trageți capșonul de protecție pe muștiuc


Dacă vi s-a prescris mai mult de o doză per aplicație repetați pașii de la 2 până la 4.

▶ Pentru a micșora riscul unei infecții cu ciuperci clătiți-vă gura și gâtul cu apă FĂRĂ să o înghițiți.

Nivelul contorului

Easyhaler® dispune de un contor, care indică câte doze unitare mai sunt disponibile.


- După fiecare a 5-a utilizare contorul avansează
- Marcajul roșu semnalizează: Mai sunt conținute doar 20 de doze unitare
- Atunci când contorul se află la 0, Easyhaler® trebuie înlocuit

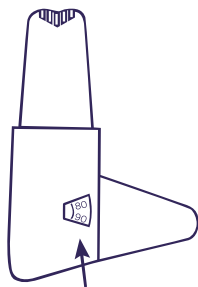

Dacă folosiți o cutie de protecție

NU trebuie să scoateți Easyhaler® din cutia de protecție pentru a-l utiliza.

- Deschideți cutia de protecție
- Scoateți capacul de protecție de pe muștiuc
- Inhalați conform descrierii de la pașii 2-4
- Amplasați capacul de protecție pe muștiuc
- Închideți cutia de protecție

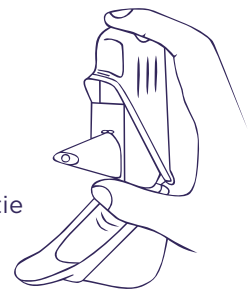

La o utilizare eronată


Tehnice Easyhaler® împiedică o dozare dublă!

Atunci când...


- Easyhaler® a fost încărcat din greșeală
- Easyhaler® a fost acționat mai mult decât o dată
- S-a expirat în aparat

Apoi...

- Bateți ușor Easyhaler® cu muștiucul pe suprafața unei mese sau în mâna dumneavoastră

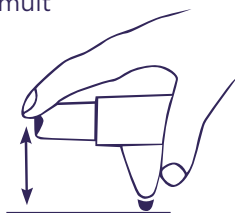

Informații suplimentare găsiți pe:
www.easyhaler.de

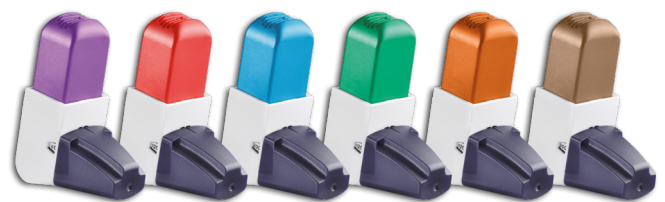

ORION Pharma GmbH

Notkestraße 9 · 22607 Hamburg
Fon 040-899689-0
info-hamburg@orionpharma.com
www.orionpharma.de



Manufactured in Finland

ORION
PHARMA