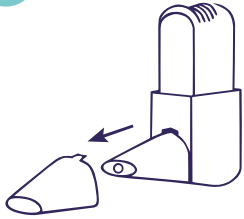
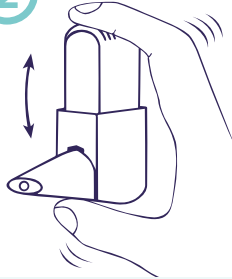


Jednostavna primena:

Udisanje pomoću Easyhaler-a® korak po korak.

1


- Skinuti poklopac sa usnika

Protresti**2**

- Easyhaler® tri do pet puta snažno protresti

Pritisnuti**3**

- Dozni inhalator držati uspravno
- Palcem i kažiprstom jednom snažno pritisnuti dok se ne čuje klik
- Potom pustiti da dozni inhalator doklizi do izlaznog položaja

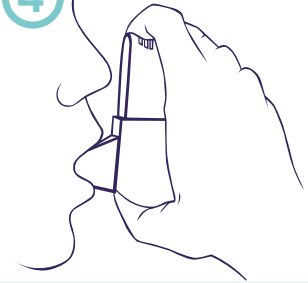Udahnuti**4**


- Normalno izdahnuti vazduh iz pluća (ali NE u Easyhaler®)
- Easyhaler® čvrsto obuhvatiti usnama
- Snažno i duboko udahnuti kroz Easyhaler®
- Pomeriti dozni inhalator od usta i zadržati dah 5 sekundi
- Zatim pokraj uređaja izdisati
- Staviti poklopac na usnik

Ako vam je propisano više od jedne doze po primeni, ponovite korake 2 do 4. Da biste smanjili rizik od gljivične infekcije, vodom isperite usta i grlo te ispljunite.

Stanje na brojilu

Easyhaler® raspolaže mehanizmom brojanja koji prikazuje koliko je pojedinačnih doza još ostalo.


- Stanje na mehanizmu brojanja se menja nakon svake 5. primene
- Crvena oznaka označava da je preostalo još samo 20 pojedinačnih doza
- Kada je brojilo na nuli, potrebno je zameniti Easyhaler®

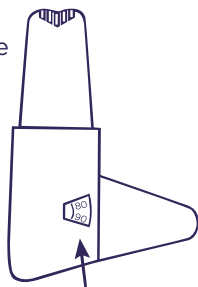

Kada koristite zaštitnu kutiju

Easyhaler® se za inhalaciju NE MORE vaditi iz zaštitne kutije.

- Otvorite zaštitnu kutiju
- Zaštitnu kapicu skinuti sa usnika
- Udahnite, kao što je opisano u koracima 2 do 4
- Zaštitnu kapicu staviti na usnik
- Zatvoriti zaštitnu kutiju

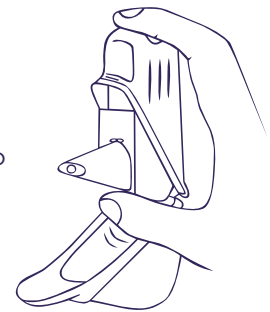

Kod pogrešne primene


Tehnika Easyhaler®-a sprečava dvostruko doziranje !

Kada...

- se u Easyhaler-u® nenamerno odmeri doza
- se u Easyhaler-u® odmeri doza više puta nego što je potrebno
- se izdahne u dozni inhalator

Onda...

- Easyhaler® sa strane usnika više puta udariti o ravnu površinu ili lupiti o dlan

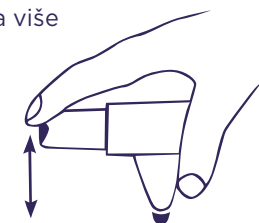

Dodatne informacije pronaći ćete pod : www.easyhaler.de



ORION Pharma GmbH

Notkestraße 9 · 22607 Hamburg

Fon 040-899689-0

info-hamburg@orionpharma.com

www.orionpharma.de



Manufactured in Finland

ORION PHARMA**EASYHALER**