


# Einfache Anwendung:

## Die Inhalation mit dem Easyhaler® Schritt für Schritt.


1

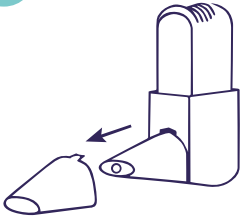

- Schutzkappe vom Mundstück abziehen

### Schütteln


2

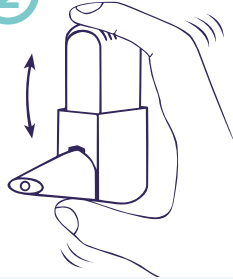

- Den Easyhaler® 3- bis 5-mal kräftig senkrecht schütteln

### Klicken


3

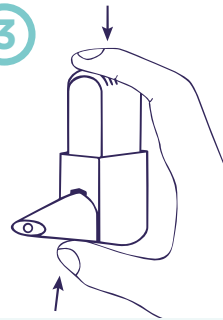

- Gerät senkrecht halten
- Zwischen Daumen und Zeigefinger einmal kräftig zusammendrücken, bis ein Klickgeräusch zu hören ist
- Danach in die Ausgangsposition zurückgleiten lassen

### Inhalieren

4

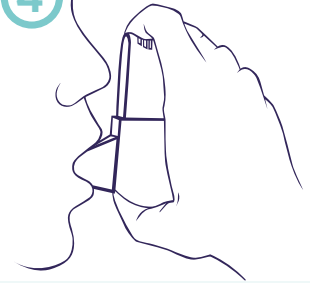

- Normal ausatmen (aber NICHT in den Easyhaler®)
- Den Easyhaler® mit den Lippen fest umschließen
- Stark und tief durch den Easyhaler® einatmen
- Gerät entfernen und 5 Sekunden den Atem anhalten
- Anschließend neben das Gerät ausatmen
- Schutzkappe auf das Mundstück stecken


Wenn Ihnen mehr als eine Dosis pro Anwendung verordnet wurde, wiederholen Sie die Schritte 2 bis 4.

Um das Risiko einer Pilzinfektion zu verringern, spülen Sie Mund und Rachen mit Wasser aus OHNE es hinunterzuschlucken.

### Der Zählerstand

Der Easyhaler® verfügt über ein Zählwerk, das anzeigt, wie viele Einzeldosen noch übrig sind.


- Nach jeder 5. Anwendung bewegt sich das Zählwerk weiter
- Rote Markierung signalisiert: nur noch 20 Einzeldosen enthalten
- Wenn Zähler auf 0 steht, muss der Easyhaler® ersetzt werden

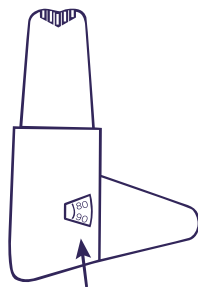

### Wenn Sie eine Schutzbox verwenden

Der Easyhaler® muss für die Inhalation NICHT aus der Schutzbox genommen werden.

- Schutzbox öffnen
- Schutzkappe vom Mundstück abziehen
- Inhalieren, wie in den Schritten 2 bis 4 beschrieben
- Schutzkappe auf das Mundstück stecken
- Schutzbox schließen

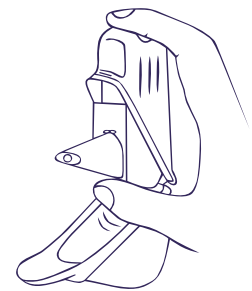

### Bei Fehlanwendung

Die Technik des Easyhaler® verhindert eine Doppeldosierung!

#### Wenn...

- der Easyhaler® versehentlich geladen wurde
- in das Gerät ausgeatmet wurde

#### Dann...

- den Easyhaler® mit dem Mundstück auf eine Tischoberfläche oder in Ihre Hand ausklopfen



Weitere Informationen finden Sie unter: [www.easyhaler.de](http://www.easyhaler.de)

